



# English


---




## Display Window

Before using Spot LXi for the first time, you must program an initial configuration screen.

1. Press the **Power** () button. The display window shows the initial configuration screen.
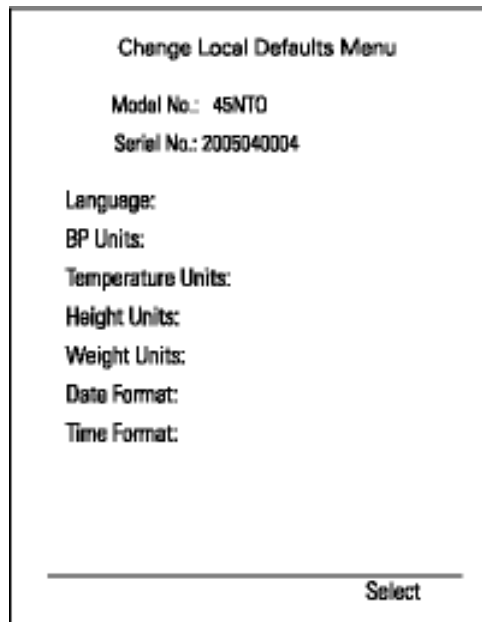
### Initial Configuration Screen



2. Use the **Select** () button to access the options and accept the entries, and use the **Navigation** () buttons to move through the menu.
3. The word "Exit" appears at the bottom of the list after you have programmed all items in the menu. You must program **all** items before you can start to use the device.
4. Scroll to Exit and press the **Select** () button to save the entries.



# Français

---

## Fenêtre d'affichage

Vous devez programmer un écran de configuration initiale avant d'utiliser le Spot LXi pour la première fois.

1. Appuyez sur le bouton **d'alimentation** (). La fenêtre affiche l'écran de configuration initiale.

### Écran de configuration initiale




Modifier valeurs/défaut Menu

No modèle : 45NTO  
No de série : 2005040004

Langue :  
Unités PS :  
Unités temp. :  
Unités taille:  
Unités poids :  
Format date :  
Format hor. :  
Quitter :

---

Sélect

2. Utilisez le bouton de **sélection** () pour accéder aux options et accepter les entrées, puis utilisez les boutons de **navigation** () pour parcourir le menu.
3. Le mot "Exit" (quitter) apparaît au bas de la liste lorsque vous avez programmé tous les éléments du menu. Vous devez programmer **tous** les éléments avant de pouvoir commencer à utiliser le dispositif.
4. Faites défiler l'écran pour le quitter, puis appuyez sur le bouton de **sélection** () pour enregistrer les entrées.




# Deutsch

---

## Anzeigefenster

Vor der erstmaligen Verwendung des Geräts Spot LXi muss eine Erstkonfiguration programmiert werden.

1. Die **Einschalttaste** () drücken. Das Anzeigefenster zeigt das Menü für die Erstkonfiguration.

### Erstkonfigurationsmenü




Lok. Einstell. ändern Menü

Modell Nr.: 45NTO  
Serien-Nr.: 2005040004

Sprache:  
BP Einheiten:  
Temp.-Einheiten:  
Höheneinheiten:  
Gewichtseinheiten:  
Datumsformat:  
Zeitformat:  
Ende:

---

Wählen

2. Mit der **Auswahltaste** () die einzelnen Optionen auswählen und die Einträge akzeptieren und dann mit den **Navigationstasten** () das Menü durchsuchen.
3. Am unteren Rand der Liste erscheint das Wort „Exit“ (Beenden), wenn alle Optionen im Menü programmiert sind. Das Gerät kann erst benutzt werden, wenn **alle** Optionen programmiert sind.
4. Die Option „Exit“ (Beenden) suchen und mit der **Auswahltaste** () die Einträge speichern.




# Italiano


---

## Display

Prima di utilizzare lo Spot LXi per la prima volta occorre programmare uno schermo iniziale di configurazione.

1. Premere il pulsante **Accensione** (). Il display mostra lo schermo iniziale di configurazione.

### Schermo iniziale di configurazione

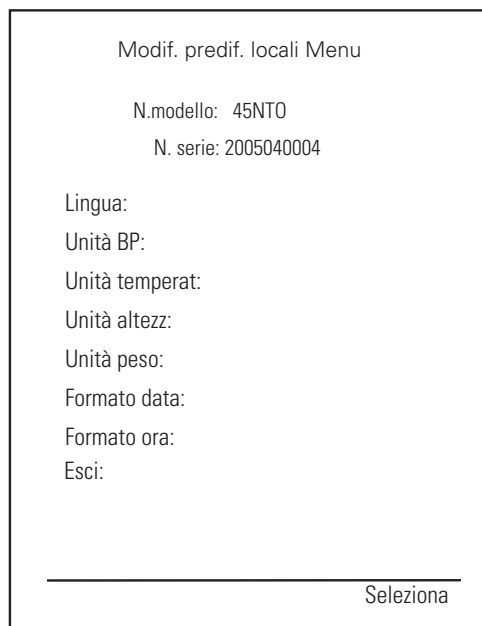




Modif. predif. locali Menu

N.modelo: 45NTO  
N. serie: 2005040004

Lingua:  
Unità BP:  
Unità temperat:  
Unità altezz:  
Unità peso:  
Formato data:  
Formato ora:  
Esci:

---

Seleziona

2. Utilizzare il pulsante **Seleziona** () per accedere alle opzioni e accettare le voci e utilizzare i pulsanti di **Navigazione** () per spostarsi all'interno del menu.
3. La voce "Esci" compare in fondo all'elenco dopo aver programmato **tutti** gli elementi del menu. È necessario programmare tutti gli elementi prima di poter utilizzare il dispositivo.
4. Scorrere fino a Esci e premere il pulsante **Seleziona** () per salvare le voci inserite.





# Português


---

## Janela do ecrã

Antes de utilizar o Spot LXi pela primeira vez, terá de ser programado um ecrã de configuração inicial.

1. Premir o botão de **Ligar/Desligar** () . O visor mostra o ecrã de configuração inicial.

### Ecrã de Configuração Inicial

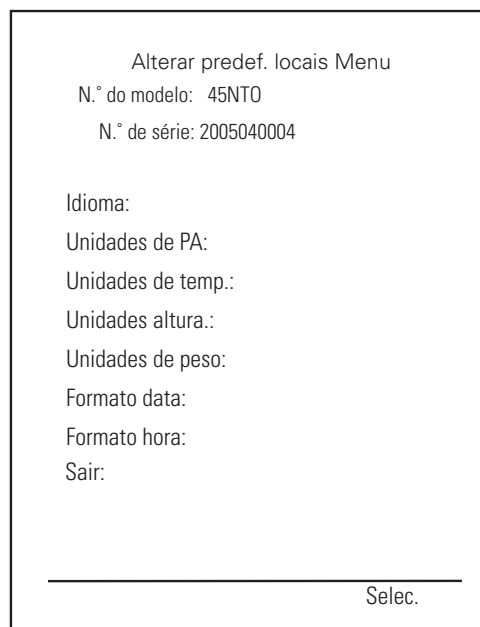




Alterar predef. locais Menu  
N.º do modelo: 45NTO  
N.º de série: 2005040004

Idioma:  
Unidades de PA:  
Unidades de temp.:  
Unidades altura.:  
Unidades de peso:  
Formato data:  
Formato hora:  
Sair:

---

Selec.

2. Utilizar o botão de **Seleccionar** () para aceder às opções e aceitar as entradas, e utilizar os botões de **Navegação** () para percorrer o menu.
3. A palavra "Sair" aparece no fim da lista depois de o utilizador ter programado todas as opções do menu. As opções terão de ser **todas** programadas antes de se poder começar a utilizar o dispositivo.
4. Deslocar-se até Sair e premir o botão de **Seleccionar** () para guardar as entradas.



# Español

---

## Ventana de la pantalla

Antes de utilizar por primera vez el monitor Spot LXi, debe programar una pantalla inicial de configuración.

1. Oprima el botón de **encendido/apagado** (). La ventana de la pantalla muestra la pantalla inicial de configuración.




### Pantalla inicial de configuración

Cambiar predet. locales Menú  
N.º modelo: 45NTO  
N.º série: 2005040004

Idioma:  
Unidades PA:  
Unid. temperatura:  
Unidades altura.:  
Unidades peso:  
Form. fecha:  
Form. hora:  
Salir:

---

Selec.

2. Utilice el botón **Seleccionar** () para acceder a las opciones y aceptar las entradas, y utilice los botones de **Navegación** () para moverse por el menú.
3. La palabra "Salir" aparece en la parte inferior de la lista después de programar todos los elementos del menú. Usted debe programar **todos** los elementos antes de poder empezar a utilizar el monitor.
4. Desplácese hasta "Salir" y oprima el botón **Seleccionar** () para guardar las entradas.




# Svenska

---

## Displayfönster

Innan du använder Spot LXi för första gången måste du programmera en konfigurationsskärm.

1. Tryck på **strömbrytaren** (). Displayfönstret visar konfigurationsskärmen.




### Konfigurationsskärm

Ändra lokal standard Meny  
Modellnr: 45NTO  
Serienr: 2005040004

Språk:  
BT-enheter:  
Temperaturenheter:  
Längdenheter:  
Viktenheter:  
Datumformat:  
Tidsformat:  
Avsluta:

---

Välj

2. Välj alternativ och acceptera inmatningarna med **valknappen** () , och navigera genom menyerna med **navigationsknapparna** ().
3. När du har programmerat alla objekt i menyn visas "Avsluta" i botten på listan. Du måste programmera **alla** objekt innan du kan börja använda enheten.
4. Skrolla till Avsluta och tryck på **valknappen** () så sparas inmatningarna.




# 简体中文

---

## 显示屏窗口

首次使用 Spot LXi 之前，必须利用程序设置初始配置屏幕。

1. 按**电源**  按钮。显示屏窗口会显示初始配置屏幕。

**初始配置屏幕**

**Change Local Defaults Menu**

**Model No.: 45NTO**

**Serial No. 2005040004**

**Language:**

**BP Units:**

**Temperature Units:**

**Height Units:**

**Weight Units:**

**Date Format:**




**Date:**

**Time Format:**

**Time:**

---

**Select**

2. 使用**选择**  按钮访问各个选项并接受输入项，然后使用**浏览**  按钮浏览菜单。
3. 利用程序设置完菜单中的所有项目后，在列表的底部会显示文字 “Exit”。使用该设备前，必须利用程序设置**所有项目**。
4. 滚动至 Exit 并按**选择**  按钮以保存输入项。





# Dansk


---

## Displayvindue

En indledningsvis konfigurationsskærm skal programmeres inden første brug af Spot LXi.

1. Tryk på **Afbryderknappen** () . Displayvinduet viser den indledningsvis konfigurationsskærm.

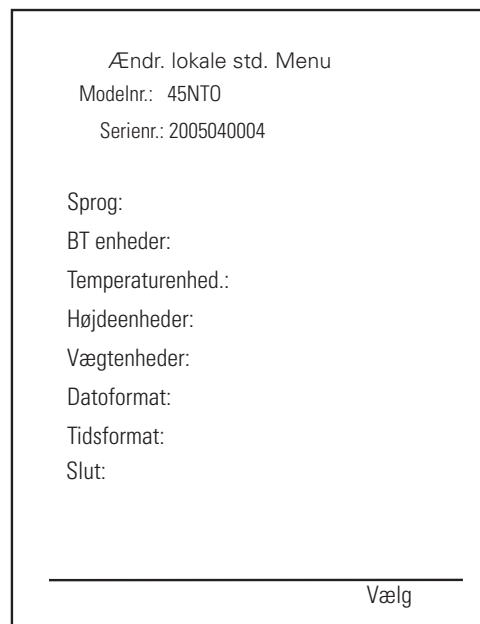


### Indledningsvis konfigurationsskærm



Ændr. lokale std. Menu  
Modelnr.: 45NTO  
Serienr.: 2005040004

Sprog:  
BT enheder:  
Temperaturenhed.:  
Højdeenheder:  
Vægtenheder:  
Datoformat:  
Tidsformat:  
Slut:

\_\_\_\_\_ Vælg

2. Tag adgang til valgmulighederne og acceptér indtastningerne ved brug af knappen **Vælg** () , og flyt gennem menuen ved brug af **Navigeringsknapperne** () .
3. Ordet "Slut" vises nederst på listen, efter du har programmeret alle emner på menuen. **Alle** emner skal programmeres, inden du kan begynde at bruge apparatet.
4. Rul ned til Slut og tryk på knappen **Vælg** () for at gemme indtastningerne.




# Nederlands

---

## Displayvenster

Voordat u de Spot LXi voor het eerst gebruikt, dient u eerst een begin-configuratiescherm te programmeren.

1. Druk op de **Aan/uit**-knop (). Het displayvenster toont het begin-configuratiescherm.

### Begin-configuratiescherm



Wijzig lokale std.wrdn Menu

Model-nr.: 45NTO  
Serienr.: 2005040004

Taal:  
BP-eenheden:  
Temp.-eenheden:  
Lengte-eenheden:  
Gewichtseenheden:  
Datumformaat:  
Tijdformaat:  
Einde:

---

Select.

2. Gebruik de **selectie**-knop () om toegang te krijgen tot de opties en de ingevoerde waarden te accepteren; gebruik de **navigatie**-knoppen () om door het menu te navigeren.
3. Nadat u alle onderdelen in het menu hebt geprogrammeerd, verschijnt het woord "Einde" onder aan de lijst. U moet **alle** onderdelen programmeren voordat u het apparaat kunt gaan gebruiken.
4. Scroll naar Einde en druk op de **selectie**-knop () om de ingevoerde gegevens op te slaan.




# Suomi

---

## Näyttöikkuna

Ennen kuin Spot LXi:tä käytetään ensimmäisen kerran, alustava asetussivu on ohjelmoitava.

1. Paina **Virta**-painiketta () . Näyttöikkunassa näkyy alustava asetussivu.

### Alustava asetussivu




Muuta paik. oletuksia Valikk

Mallinro: 45NTO  
Sarjanro: 2005040004

Kieli:  
BP-yksiköt:  
Lämpötilayksiköt:  
Pituusyksiköt:  
Painoyksiköt:  
Pvmformaatti:  
Aikaform.:  
Ulos:

---

Valitse

2. Avaa vaihtoehdot ja hyväksy syötteet **Valitse**-painikkeella () ja selaa valikkoa **Navigointi**-painikkeilla () .
3. Teksti "Poistu" ilmestyy luettelon alapuolelle, kun olet ohjelmoinut kaikki valikon aiheet. Sinun on ohjelmoitava **kaikki** aiheet, ennen kuin voit aloittaa laitteen käyttämisen.
4. Siirry kohtaan Poistu ja tallenna syötteet **Valitse**-painiketta () painamalla.




# Norsk

---

## Displayvindu

Før Spot LXi brukes første gang, må du programmere en innledende konfigurasjonsskjerm.

1. Trykk på **av/på**-knappen (). Displayvinduet viser den innledende konfigurasjonsskjermen.

### Innledende konfigurasjonsskjerm




Endre lokalstandarder Meny

Modellnr.: 45NTO  
Serienr.: 2005040004

Språk:  
BP-enheter:  
Temperaturenheter:  
Høydeenheter:  
Vektenheter:  
Datoformat:  
Tidsformat:  
Utgang:


---

Velg

2. Trykk på **Velg**-knappen () for å få adgang til alternativene og for å bekrefte oppføringer, og bruk **Navigasjon**-knappene () for å gå gjennom menyen.
3. Ordet "Avslutt" vises nederst på listen etter at du har programmert alle elementene i menyen. Du må programmere **alle** elementene før du kan begynne å bruke instrumentet.
4. Rull til Avslutt og trykk på **Velg**-knappen () for å lagre oppføringene.



Welch Allyn, Inc.  
4341 State Street Road  
Skaneateles Falls, NY 13153  
<http://www.welchallyn.com/about/company/locations.htm>

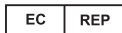

Regulatory Affairs Representative  
Welch Allyn Limited  
Navan Business Par  
Dublin Road  
Navan, County Meath, Republic of Ireland

Mat. No. 721151  
DIR 80018888 Ver B