



Hillrom™



PST 300
Mesa Quirúrgica de Precisión

PARA HACER MÁS POR TUS PACIENTES, SÉ MÁS EXIGENTE CON TU EQUIPO.

No hay ninguna duda que tu personal quirúrgico hará todo lo posible por ayudar a cada paciente, pero un equipo obsoleto o inadecuado para intervenciones de mayor complejidad puede poner en riesgo tu eficiencia y, en el peor de los casos, la seguridad del paciente.

¿Y si gracias a tu equipo pudieras lograr más, con seguridad y eficiencia?

TE PRESENTAMOS LA MESA QUIRÚRGICA DE PRECISIÓN PST 300 DE HILLROM™.

Esta mesa, versátil y fácil de usar, es una base sólida para soportar el volumen y la variedad de intervenciones a las que te enfrentas a diario.

Así podrás ayudar a más personas, realizar más intervenciones especializadas y dedicarte más a tus pacientes en vez de perder el tiempo con equipos complejos.

La PST300 te ayuda a hacer más de lo que es realmente importante.



INTUITIVA

La mesa es fácil de usar gracias a componentes livianos, un sistema de acople mediante ganchos con codificación de alineación automática, un control remoto sencillo y un montaje rápido.



EFICIENTE

Su diseño modular, el manejo ergonómico y una obtención de imágenes de 360° te ayudan a agilizar** el flujo de trabajo y atender a más pacientes, más rápidamente.



VERSÁTIL

Una misma mesa permite varias posiciones de distintas aplicaciones quirúrgicas, lo cual te ayuda a aprovechar la inversión y ampliar el tipo de cirugías.

**Capacidad de obtención de imágenes 360° con componentes específicos de carbono.



CIRUGÍA GENERAL

MÁS POSICIONES PARA MÁS PACIENTES

La PST 300 es flexible y se adapta a las distintas aplicaciones quirúrgicas que llevas a cabo a diario. Disfruta de la superficie ideal para cada intervención: solo tienes que elegir la configuración y los accesorios correctos.



CIRUGÍA BARIÁTRICA

Piernas separadas para intervenciones gástricas por laparoscopia



CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Posición supina para intervenciones cardiovasculares, incluido el acceso del arco en C de RX



CIRUGÍA DE TIROIDES

Posición supina para intervenciones de la tiroides



CIRUGÍA RENAL

Posición lateral para intervenciones de nefrología y torácicas



CIRUGÍA GINECOLÓGICA O UROLÓGICA

Posición de litotomía para intervenciones ginecológicas o urológicas




OFTALMOLOGÍA/ OTORRINOLARINGOLOGÍA

Posición supina con sistema de cabezales para Cirugías de Oftalmología y Otorrinolaringología

ORTOPEDIA

Gracias a nuestra PST 300, tu mesa de cirugía general también permitirá múltiples intervenciones ortopédicas.

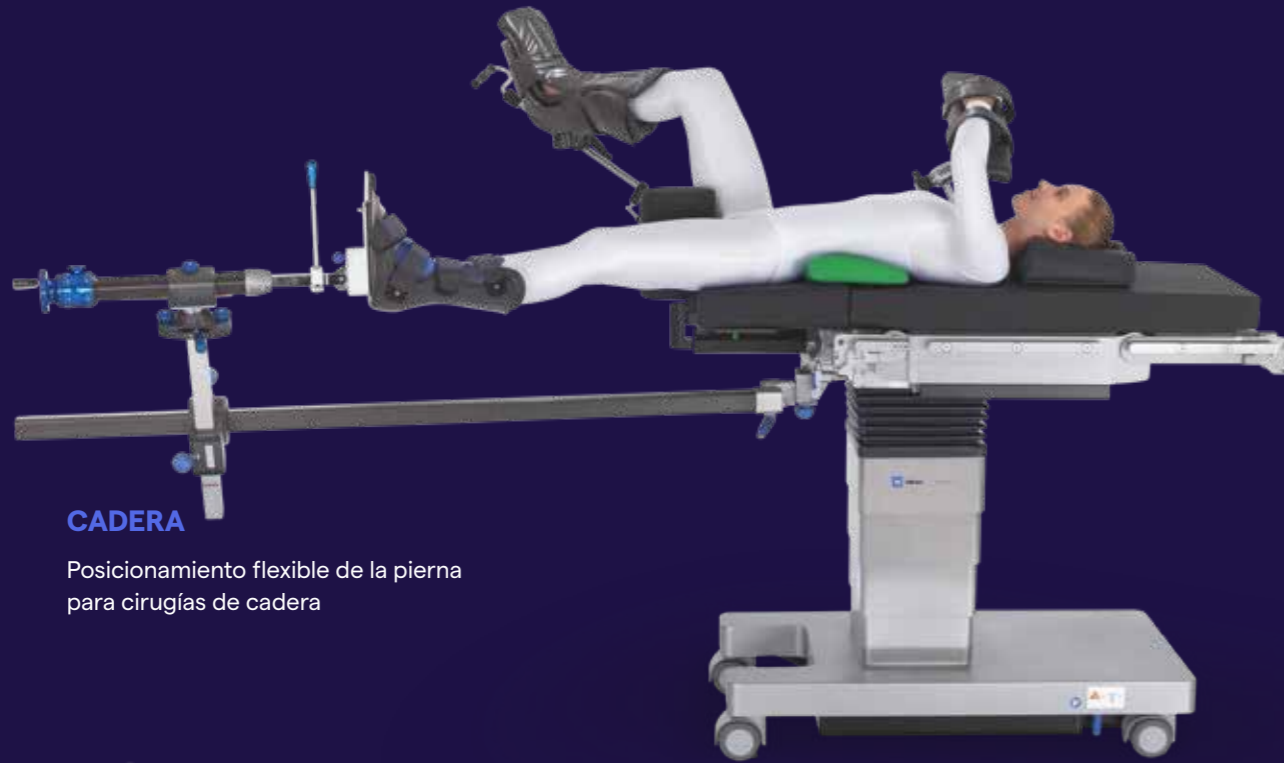

CADERA

Posicionamiento flexible de la pierna para cirugías de cadera



HOMBRO

Posición de silla de playa para intervenciones de hombro



RODILLA

Posición supina con acceso libre para artroscopia



MANO

Posición supina con complemento flexible y radiolúcido 360° para intervenciones de la mano



PIERNA

Unidad de extensión, conjunto para fémur, tibia y cadera

COLUMNA VERTEBRAL Y NEUROCIRUGÍA

Olvídate de mesas especializadas con una sola función. Nuestra PST 300 se adapta fácilmente a intervenciones de la columna vertebral y neurocirugía con sus configuraciones y accesorios flexibles.



COLUMNA VERTEBRAL

Componentes de mesa totalmente radiolúcidos de 360° para intervenciones de la columna vertebral

360°

Obtención de imágenes simplificada **

El tablero radiolúcido de la mesa y el equipo de fibra de carbono facilitan la obtención de imágenes a 360°, en especial en el caso de las radiografías de aspecto anterior y posterior. Además, puedes colocar un arco en C de RX donde lo necesites con un cómodo desplazamiento longitudinal.

**Capacidad de obtención de imágenes 360° con componentes específicos de carbono.



NEURO

Segmento de mesa y fijador para el cráneo compatibles con la obtención de imágenes en 3D para neurocirugía



NEUROCIRUGÍA

Posición Semi-Fowler con fijador para el cráneo para permitir cirugías craneales posteriores

DISEÑO INTUITIVO

Hemos diseñado la PST 300 para que sea fácil de usar, para que tu personal quirúrgico pueda centrarse en lo que importa: el paciente que tiene delante.

Colocación rápida

La colocación y las modificaciones son rápidas y sencillas, gracias a los componentes livianos de la mesa y al SISTEMA DE ANCLAJE MEDIANTE GANCHOS CON CODIFICACIÓN DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA.

Fácil transporte

Ruedas dobles para ayudarte a desplazar la mesa donde la necesites.

Diseño intuitivo

Todos los elementos operativos tienen códigos de color para un rápido acceso y facilidad de uso.

Funciones motorizadas

El desplazamiento longitudinal, los pedales y las funciones de inclinación motorizadas eliminan el trabajo pesado de tu labor.

Desplazamiento longitudinal para acceso al arco en C de RX

El desplazamiento longitudinal motorizado de 340 mm permite un sencillo acceso para la obtención de imágenes.

Diseño estilizado

Disfruta de una mejor ergonomía y llega al paciente colocando el pie debajo de la base y accediendo al arco en C de RX.

Control remoto intuitivo, inalámbrico o por cable




El control remoto retroiluminado es fácil de usar en entornos con poca luz. Sus iconos, colores y símbolos coinciden con los de la columna de control para mayor simplicidad y eficiencia.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Hemos fabricado la PST 300 para adaptarse a entornos quirúrgicos reales, como el tuyo.

Mesa quirúrgica de precisión PST 300	
Dimensiones del tablero de la mesa	223,6 cm L x 60 cm A (88,1" L x 23,6" A)
Peso neto de la mesa	230 kg/507 lb
Ajuste de altura	66 cm-103 cm (± 1 cm)/26"-40,6" ($\pm 0,4$ ")
Trendelenburg/Trendelenburg inverso	$\pm 30^\circ$ ($\pm 2^\circ$)
Inclinación	$\pm 25^\circ$ ($\pm 2^\circ$)
Desplazamiento longitudinal	34 cm (± 1 cm)/13,4" ($\pm 0,4$ ") lateral de cabeza: 19,5 cm (7,7")/lateral de pie 14,5 cm (5,7")
Rango de ajuste de la sección dorsal	+80°/-60° ($\pm 2^\circ$)
Rango de ajuste de la sección de pierna	+80°/-92° ($\pm 2^\circ$)
Posicionamiento cero	Nivelación motorizada de todas las secciones
Capacidad de carga máxima	400 kg (882 lb)
Accesorios compatibles hacia extremo inferior	22
Accesorios compatibles hacia extremo superior	10

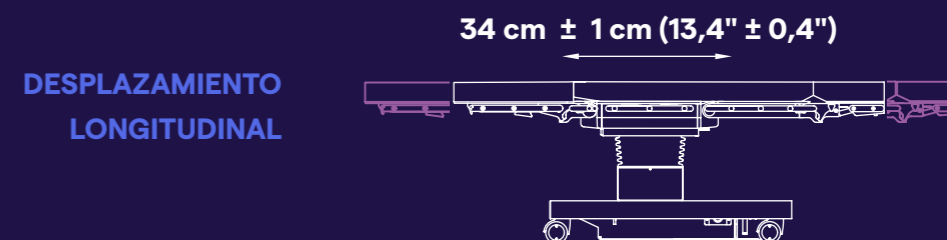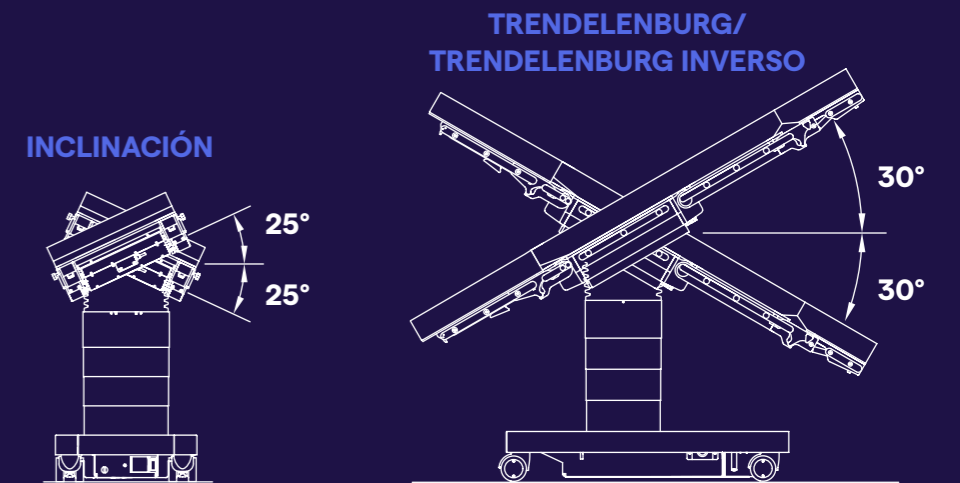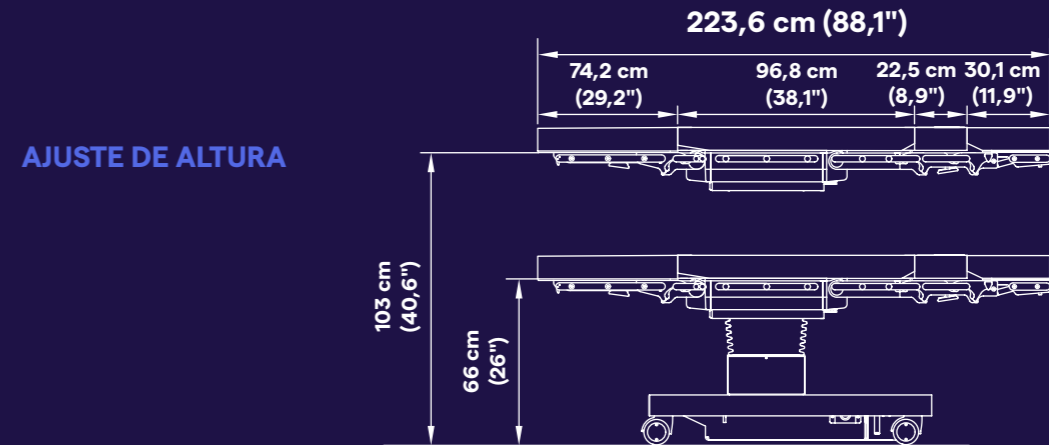

OBTÉN MÁS RENDIMIENTO Y EL MANTENIMIENTO DE LOS EXPERTOS.

En la línea del sólido legado de nuestros equipos quirúrgicos, la PST 300 cuenta con una ingeniería de alta calidad a un precio más que razonable.

- Su diseño intuitivo permite un montaje y una preparación rápida y sencilla
- Fácil acceso a la columna y la base cuando se necesite servicio técnico
- Gracias a las ruedas de doble articulación, la camilla puede desplazarse y colocarse en su lugar con facilidad, incluso en superficies irregulares


Si necesitas ayuda adicional, puedes contar con nuestro servicio técnico. En Hillrom™ somos líderes en este sector y podrás recibir soporte experto y tiempos de respuesta muy rápidos.




La PST 300 hace más, para que también usted haga más.



DISTINTAS APLICACIONES QUIRÚRGICAS
en una variedad de posiciones

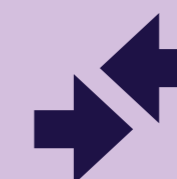

MÁS DE 50
ACCESORIOS COMPATIBLES

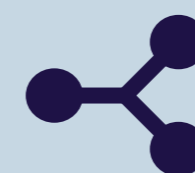

COMPATIBILIDAD CON ACCESORIOS

DE TERCEROS

*La capacidad de peso puede variar en función de la configuración de la mesa. Para obtener más información, consulta las instrucciones de uso.

**Capacidad de obtención de imágenes 360° con componentes específicos de carbono.



Hillrom™

ACERCA DE HILLROM™

Hillrom™ es líder universal en tecnología médica y sus 10 000 empleados solo tienen un objetivo: mejorar los resultados de los pacientes y sus cuidadores mediante el avance del cuidado monitorizado. Nuestras innovaciones llegan a más de 7 millones de pacientes cada día en todo el mundo. Ayudan a determinar el diagnóstico y a iniciar el tratamiento de forma temprana, a optimizar la eficiencia quirúrgica y acelerar la recuperación del paciente, a la vez que simplifican la comunicación clínica y acercan la asistencia sanitaria al domicilio. Estos resultados son posibles gracias a la conexión de camillas inteligentes, elevaciones de pacientes, tecnologías de evaluación y monitorización de pacientes, herramientas de colaboración para cuidadores, dispositivos de cuidado respiratorio, equipos avanzados para quirófanos y más, con lo cual se obtiene información de utilidad clínica en tiempo real en el lugar donde se presta la asistencia sanitaria. Obten información adicional en hillrom.com.

Para más información, por favor contacta a tu representante de ventas Hillrom local o visita Hillrom.lat

hillrom.lat

2500 NW 107th Ave, Suite 300 Doral, FL – USA 33172

La PST 300 está destinada a ser utilizada por médicos y personal médicamente calificado. Este dispositivo médico es un producto sanitario regulado que, de conformidad con dicha normativa, lleva una marca CE. Hill-Rom recomienda que leas atentamente las instrucciones detalladas incluidas en los documentos que acompañan a los dispositivos médicos para un uso seguro y adecuado. El personal de los establecimientos sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuado de estos dispositivos médicos. Hill-Rom se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía que Hill-Rom hace es la garantía expresa por escrito extendida en la venta o alquiler de sus productos. TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG es una subsidiaria de Hill-Rom Holdings, Inc.