



Hillrom™



SUPERFICIE NP100 MULTIDENSA

Prevención de lesiones de manera segura y eficaz

La superficie NP100 Multidensa de Hillrom es una solución para ayudar a prevenir las lesiones por presión. Su diseño con múltiples densidades, permiten una mejor adaptación a las distintas zonas del cuerpo y sus necesidades de uso. Se adapta a todas las posiciones de la cama. La superficie, completamente hermética, dispone de una funda de poliuretano, multielástica, impermeable, bacteriostática, fungicida, fácil de limpiar y desinfectar.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

El diseño en forma de cubos se adapta independientemente a la forma del cuerpo y reduce los puntos de presión

El diseño de cubos de espuma y el espacio entre ellos, favorece el paso del aire, lo que reduce la creación de humedad, disminuyendo así el riesgo de maceración y de cizallamiento

La zona de los talones, de baja densidad, proporciona un soporte adecuado para talones y tobillos

Secciones laterales de alta densidad diseñadas para facilitar la salida de la cama del paciente y para aumentar su seguridad


Funda con cremallera cubierta y asas de transporte integradas



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo	198 o 203 cm
Ancho	85 o 90 cm
Alto	14 cm
Peso terapéutico recomendado	de 30 a 150 kg
Carga de trabajo segura	250 kg
Costuras	Cosidas

Para limpieza y desinfección: se recomienda seguir las instrucciones del manual de usuario.

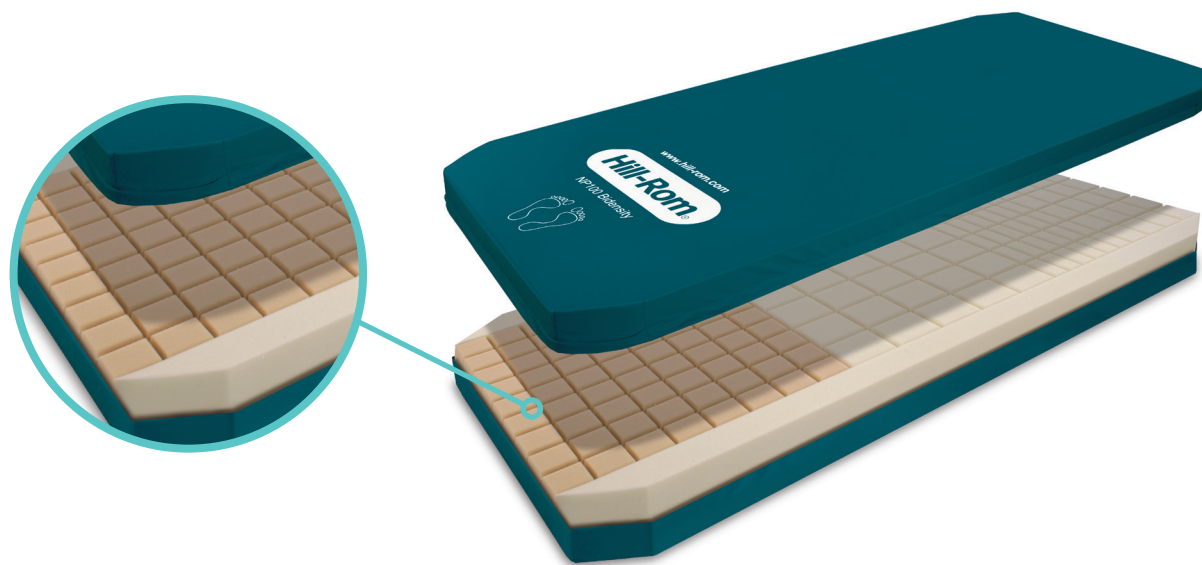

Para más información, comunícate con tu representante local Hillrom o visita hillrom.lat

hillrom.lat

Hill-Rom se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía que hace Hill-Rom es la garantía expresa por escrito extendida en la venta o alquiler de sus productos.